

## CONTACTS

One-size-fits all

Universaalgröte  
Taille universelle  
Universe mate  
Taglia universale  
Talla única  
Tamanho universal

**AUSTRIA**  
Bauerfeind Ges.m.b.H.  
Goebelstr. 20  
10020 Wien  
P +43 (0) 1 480 435-130  
F +43 (0) 800 4430-131  
E info@bauerfeind.at

**BENELUX**  
Bauerfeind Benelux B.V.  
Waardeveld 1  
2031 BK Haarlem  
P +31 (0) 23 531-9427  
F +31 (0) 23 521-1970  
E info@bauerfeind.nl

**THE NETHERLANDS**  
P +31 (0) 23 531-9427  
F +31 (0) 23 521-1970  
E info@bauerfeind.nl

**BELGIUM**  
P +32 (0) 2 527-4560  
F +32 (0) 2 529-5345  
E info@bauerfeind.be

**BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
Bauerfeind d.o.o.  
Meše Setemirca 19  
71000 Sarajevo  
P +387 (0) 33 610-100  
F +387 (0) 33 619-422  
E info@bauerfeind.ba

**CROATIA**  
Bauerfeind d.o.o.  
Goekela 20  
10020 Zagreb  
P +385 (0) 1 482-855  
F +385 (0) 1 6542-860  
E info@bauerfeind.hr

**FRANCE**  
Bauerfeind France S.A.R.L.  
Via Coraglia 5  
95975 Rosasy CDG Cedex  
P +33 (0) 1 4843-2996  
F +33 (0) 1 4843-2963  
E info@bauerfeind.fr

**ITALY**  
Bauerfeind Italia Srl  
Via Coraglia 5  
20092 Cinisello Balsamo (MI)  
P +39 (0) 2 9777 5313  
F +39 (0) 2 9777 5900  
E info@bauerfeind.it

**REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA**  
Bauerfeind d.o.o. Skopje  
50 Dvornja 24  
a  
1000 Skopje  
P +389 (0) 2 3179-002  
F +389 (0) 2 3179-024  
E info@bauerfeind.mk

**SERBIA**  
Bauerfeind d.o.o.  
102 Omladinski brigada  
11070 Novi Beograd  
P +381 (0) 11 2287-500  
F +381 (0) 11 2287-052  
E info@bauerfeind.rs

**SINGAPORE**  
Bauerfeind Singapore Pte Ltd.  
Bk 41 Cambridge Road #11-12  
Singapore 170041  
P +65 6596-3497  
F +65 6295-5062  
E info@bauerfeind.com.sg

**SLOVENIA**  
Bauerfeind d.o.o.  
Dolinska cesta 242 b  
1000 Ljubljana  
P +386 (0) 1 4272-111  
F +386 (0) 1 4272-951  
E info@bauerfeind.si

**SPAIN**  
Bauerfeind Iberica, S.A.  
Calle Albasceles, 23, Entresuelo C  
46007 Valencia  
P +34 96 385-6633  
F +34 96 385-6699  
E info@bauerfeind.es

**SWITZERLAND**  
Bauerfeind AG  
Verderi Biote 5  
5452 Oberrohrdorf  
P +41 (0) 56 485-8242  
F +41 (0) 56 485-8259  
E info@bauerfeind.ch

**UNITED ARAB EMIRATES**  
Bauerfeind Middle East FZ LLC  
Dubai Healthcare City  
Building 40, P.O. Box 505116  
Dubai  
P +971 4 4335-684  
F +971 4 4370-344  
E info@bauerfeind.ae

**USA**  
Bauerfeind USA, Inc.  
75 14<sup>th</sup> St NE  
Suite 2030  
Atlanta, GA 30309  
P +1 800 423-3405  
P +1 404 201-7860  
F +1 404 201-7839  
E info@bauerfeindusa.com

**UK**  
Bauerfeind UK Ltd  
11000 The Quadrant  
Barnet, London N4 7JN  
P +44 (0) 20 8448 4444  
F +44 (0) 20 8448 4444  
E info@bauerfeind.co.uk

**GERMANY**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**EUROPEAN UNION**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**USA**  
Bauerfeind USA, Inc.  
75 14<sup>th</sup> St NE  
Suite 2030  
Atlanta, GA 30309  
P +1 800 423-3405  
P +1 404 201-7860  
F +1 404 201-7839  
E info@bauerfeindusa.com

**UK**  
Bauerfeind UK Ltd  
11000 The Quadrant  
Barnet, London N4 7JN  
P +44 (0) 20 8448 4444  
F +44 (0) 20 8448 4444  
E info@bauerfeind.co.uk

**GERMANY**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**EUROPEAN UNION**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**USA**  
Bauerfeind USA, Inc.  
75 14<sup>th</sup> St NE  
Suite 2030  
Atlanta, GA 30309  
P +1 800 423-3405  
P +1 404 201-7860  
F +1 404 201-7839  
E info@bauerfeindusa.com

**UK**  
Bauerfeind UK Ltd  
11000 The Quadrant  
Barnet, London N4 7JN  
P +44 (0) 20 8448 4444  
F +44 (0) 20 8448 4444  
E info@bauerfeind.co.uk

**GERMANY**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**EUROPEAN UNION**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**USA**  
Bauerfeind USA, Inc.  
75 14<sup>th</sup> St NE  
Suite 2030  
Atlanta, GA 30309  
P +1 800 423-3405  
P +1 404 201-7860  
F +1 404 201-7839  
E info@bauerfeindusa.com

**UK**  
Bauerfeind UK Ltd  
11000 The Quadrant  
Barnet, London N4 7JN  
P +44 (0) 20 8448 4444  
F +44 (0) 20 8448 4444  
E info@bauerfeind.co.uk

**GERMANY**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**EUROPEAN UNION**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**USA**  
Bauerfeind USA, Inc.  
75 14<sup>th</sup> St NE  
Suite 2030  
Atlanta, GA 30309  
P +1 800 423-3405  
P +1 404 201-7860  
F +1 404 201-7839  
E info@bauerfeindusa.com

**UK**  
Bauerfeind UK Ltd  
11000 The Quadrant  
Barnet, London N4 7JN  
P +44 (0) 20 8448 4444  
F +44 (0) 20 8448 4444  
E info@bauerfeind.co.uk

**GERMANY**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**EUROPEAN UNION**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com


**USA**  
Bauerfeind USA, Inc.  
75 14<sup>th</sup> St NE  
Suite 2030  
Atlanta, GA 30309  
P +1 800 423-3405  
P +1 404 201-7860  
F +1 404 201-7839  
E info@bauerfeindusa.com

**UK**  
Bauerfeind UK Ltd  
11000 The Quadrant  
Barnet, London N4 7JN  
P +44 (0) 20 8448 4444  
F +44 (0) 20 8448 4444  
E info@bauerfeind.co.uk

**GERMANY**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**EUROPEAN UNION**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

# b:ioynz® ankle stirrup

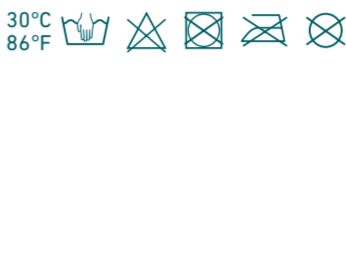

**■ Span Link International LLC**  
28 West Jeffery Blvd.  
11729 Deer Park, NY  
United States

**BAUERFEIND AG**  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany

**P +49 (0) 36628 66-4000**  
**F +49 (0) 36628 66-4499**  
**E info@bauerfeind.com**

**Rev. 4 - 2024-08, 11/3/29**

Chère cliente, cher client,  
veuillez lire et suivre méticuleusement les indications de la présente notice d'utilisation ainsi que les remarques du professionnel formé<sup>1</sup>.  
Pour toutes questions, veuillez vous adresser à votre médecin ou à votre revendeur spécialisé.

**Utilisation**  
b:ioynz ankle stirrup est un dispositif médical. Il s'agit d'une orthèse<sup>1</sup> de la cheville destinée à la stabilisation sur un plan frontal.

**Indications**  
• Protection post-opératoire après suture / reconstruction du ligament  
• Traumatisme par pronation et / ou supination  
• Thrombose veineuse en cas de distorsions de la cheville (tous degrés de gravité)

• Fonctionnalité fonctionnelle des ruptures des ligaments  
• Fracture de type Weber A  
• Instabilités ligamentaires chroniques

**Risques d'utilisation**  
• Si vous utilisez votre b:ioynz sur la base d'une prescription médicale ou dans le cadre de douleurs / blessures aiguës, demandez impérativement avant de commencer l'utilisation un avis médical professionnel<sup>2</sup> et respectez-le. Il peut y avoir des restrictions personnelles, ce qui vous sera expliqué par le professionnel formé<sup>2</sup>, en complément, par la présente notice d'utilisation. Si, pendant l'utilisation de votre b:ioynz, vous ressentez des douleurs, interrompez son utilisation et adressez-vous immédiatement à un médecin.

• Soyez en contact extrêmement prudent, car votre capacité à marcher et à vous tenir debout (et, dans le cas des produits pour les mains et les bras, votre capacité à saisir les objets) peut également être fortement diminuée.

• À chaque fois que vous allez marcher, le produit doit être retiré. Ne portez jamais le produit en conduisant un véhicule ou tout autre moyen de transport ou encore piloter une machine, vérifiez au préalable que vous n'avez aucune restriction de conduite en raison de l'utilisation de votre b:ioynz. Si vous avez des limitations de conduite, consultez votre médecin.

• Si vous avez des limitations de conduite, consultez votre médecin.

**Disposal**  
Once you have finished using the product, please dispose of it according to local specifications.

**Material content**  
Polypropylene (PP), gel, PVC, nylon, metal (rivet)

**Medical Device**  
■ PatMatrx Unique Device Identifier (UDI)

**Warranty**  
The statutory regulations of the country of purchase apply. Please first contact the retailer from whom you obtained the product directly in the event of a potential claim under the warranty. The product may be limited or excluded if the instructions on how to handle and care for the b:ioynz ankle stirrup have not been observed.

**Notes on reuse**  
The product is not intended to be fitted to one patient only.

**Orthèse** = orthopedic aid used to stabilize, immobilize, correct, or correct the position of the torso  
**1** A specialist is any person who is authorized according to the state or institutional regulations as well as other provisions relevant to them for fitting and instruction in the use of orthopedic aids. As the manufacturer, we strongly recommend that this person be trained in orthopedics or possess comparable acquired competencies as well as dispose of orthopedic infrastructure.

**Estimado/a cliente/a,**  
por favor, lea y siga atentamente las especificaciones de estas instrucciones de uso, así como las indicaciones del personal competente<sup>1</sup>.  
Para cualquier pregunta, póngase en contacto con su médico o su tienda especializada.

**Ámbito de aplicación**  
b:ioynz ankle stirrup es un producto médico. Se trata de una ortesis<sup>1</sup> para la articulación del tobillo para estabilizar en el plano frontal.

**Indicaciones**  
• Protección postoperatoria tras suturas / reconstrucción de ligamentos  
• Traumatismo en pronación y / o supinación  
• Terapia conservadora en caso de distorsiones de la articulación del tobillo (todos los grados de gravedad)

• Funcionalidad de la rotura de los ligamentos  
• Fractura Weber A  
• Inestabilidades ligamentosas crónicas

**Riesgos de la aplicación**  
• Si utiliza su producto b:ioynz por receta médica o debido a dolencias o lesiones agudas, solicite y siga obligatoriamente el consejo médico profesional<sup>2</sup> antes de utilizarlo por primera vez. Puede haber restricciones individuales sobre las que el personal especializado<sup>2</sup> o el personal competente<sup>2</sup> informará antes de utilizarlo por primera vez. Interrumpa su uso y póngase en contacto con un médico lo antes posible.

• Siempre sea extremadamente prudente con su capacidad para caminar y mantenerse en pie (en el caso de los productos para manos y brazos, la capacidad de agarrar). También puede verse gravemente afectada.

• En el caso de los productos que afectan al aparato locomotor, compruebe las condiciones antideslizantes del suelo en cada vez que camine, se ponga de pie o cargue peso después de la parte del cuerpo tratada. Existe un riesgo de resbalar y caídas.

• El producto no debe estar en contacto con pomadas, lociones o ungüentos que contengan grasas o aceites.

• Si detecta la aparición de cambios negativos o un aumento de las molestias al utilizar el producto, interrumpa su uso y póngase en contacto con un médico lo antes posible.

• Si tiene alguna restricción de conducción, consulte a su médico.

• Si tiene alguna restricción de conducción, consulte a su médico.

• Si tiene alguna restricción de conducción, consulte a su médico.

**Composición del material**  
Polipropileno (PP), gel, PVC, nylon, metal (rivete)

**Medical Device (Dispositivo médico)**  
■ Identificativo de la matriz de datos UDI

**AUSTRIA**  
Bauerfeind Ges.m.b.H.  
Goebelstr. 20  
10020 Wien  
P +43 (0) 800 4430-130  
F +43 (0) 800 4430-131  
E info@bauerfeind.at

**BENELUX**  
Bauerfeind Benelux B.V.  
Waardeveld 1  
2031 BK Haarlem  
P +31 (0) 23 531-9427  
F +31 (0) 23 521-1970  
E info@bauerfeind.nl

**THE NETHERLANDS**  
P +31 (0) 23 531-9427  
F +31 (0) 23 521-1970  
E info@bauerfeind.nl

**BELGIUM**  
P +32 (0) 2 527-4560  
F +32 (0) 2 529-5345  
E info@bauerfeind.be

**BOSNIA AND HERZEGOVINA**  
Bauerfeind d.o.o.  
Meše Setemirca 19  
71000 Sarajevo  
P +387 (0) 33 610-100  
F +387 (0) 33 619-422  
E info@bauerfeind.ba

**CROATIA**  
Bauerfeind d.o.o.  
Goekela 20  
10020 Zagreb  
P +385 (0) 1 482-855  
F +385 (0) 1 6542-860  
E info@bauerfeind.hr

**FRANCE**  
Bauerfeind France S.A.R.L.  
Via Coraglia 5  
95975 Rosasy CDG Cedex  
P +33 (0) 1 4843-2996  
F +33 (0) 1 4843-2963  
E info@bauerfeind.fr

**ITALY**  
Bauerfeind Italia Srl  
Via Coraglia 5  
20092 Cinisello Balsamo (MI)  
P +39 (0) 2 9777 5313  
F +39 (0) 2 9777 5900  
E info@bauerfeind.it

**REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA**  
Bauerfeind d.o.o. Skopje  
50 Dvornja 24  
a  
1000 Skopje  
P +389 (0) 2 3179-002  
F +389 (0) 2 3179-024  
E info@bauerfeind.mk

**SERBIA**  
Bauerfeind d.o.o.  
102 Omladinski brigada  
11070 Novi Beograd  
P +381 (0) 11 2287-500  
F +381 (0) 11 2287-052  
E info@bauerfeind.rs

**SINGAPORE**  
Bauerfeind Singapore Pte Ltd.  
Bk 41 Cambridge Road #11-12  
Singapore 170041  
P +65 6596-3497  
F +65 6295-5062  
E info@bauerfeind.com.sg

**SLOVENIA**  
Bauerfeind d.o.o.  
Dolinska cesta 242 b  
1000 Ljubljana  
P +386 (0) 1 4272-111  
F +386 (0) 1 4272-951  
E info@bauerfeind.si

**SPAIN**  
Bauerfeind Iberica, S.A.  
Calle Albasceles, 23, Entresuelo C  
46007 Valencia  
P +34 96 385-6633  
F +34 96 385-6699  
E info@bauerfeind.es

**SWITZERLAND**  
Bauerfeind AG  
Verderi Biote 5  
5452 Oberrohrdorf  
P +41 (0) 56 485-8242  
F +41 (0) 56 485-8259  
E info@bauerfeind.ch

**UK**  
Bauerfeind UK Ltd  
11000 The Quadrant  
Barnet, London N4 7JN  
P +44 (0) 20 8448 4444  
F +44 (0) 20 8448 4444  
E info@bauerfeind.co.uk

**GERMANY**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**EUROPEAN UNION**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**USA**  
Bauerfeind USA, Inc.  
75 14<sup>th</sup> St NE  
Suite 2030  
Atlanta, GA 30309  
P +1 800 423-3405  
P +1 404 201-7860  
F +1 404 201-7839  
E info@bauerfeindusa.com

**UK**  
Bauerfeind UK Ltd  
11000 The Quadrant  
Barnet, London N4 7JN  
P +44 (0) 20 8448 4444  
F +44 (0) 20 8448 4444  
E info@bauerfeind.co.uk

**GERMANY**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**EUROPEAN UNION**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**USA**  
Bauerfeind USA, Inc.  
75 14<sup>th</sup> St NE  
Suite 2030  
Atlanta, GA 30309  
P +1 800 423-3405  
P +1 404 201-7860  
F +1 404 201-7839  
E info@bauerfeindusa.com

**UK**  
Bauerfeind UK Ltd  
11000 The Quadrant  
Barnet, London N4 7JN  
P +44 (0) 20 8448 4444  
F +44 (0) 20 8448 4444  
E info@bauerfeind.co.uk

**GERMANY**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**EUROPEAN UNION**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**USA**  
Bauerfeind USA, Inc.  
75 14<sup>th</sup> St NE  
Suite 2030  
Atlanta, GA 30309  
P +1 800 423-3405  
P +1 404 201-7860  
F +1 404 201-7839  
E info@bauerfeindusa.com

**UK**  
Bauerfeind UK Ltd  
11000 The Quadrant  
Barnet, London N4 7JN  
P +44 (0) 20 8448 4444  
F +44 (0) 20 8448 4444  
E info@bauerfeind.co.uk

**GERMANY**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**EUROPEAN UNION**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com

**USA**  
Bauerfeind USA, Inc.  
75 14<sup>th</sup> St NE  
Suite 2030  
Atlanta, GA 30309  
P +1 800 423-3405  
P +1 404 201-7860  
F +1 404 201-7839  
E info@bauerfeindusa.com

**UK**  
Bauerfeind UK Ltd  
11000 The Quadrant  
Barnet, London N4 7JN  
P +44 (0) 20 8448 4444  
F +44 (0) 20 8448 4444  
E info@bauerfeind.co.uk

**GERMANY**  
Bauerfeind AG  
Triebeser Straße 16  
07937 Zuelzendorf-Triebes  
Germany  
P +49 (0) 36628 66-4000  
F +49 (0) 36628 66-4499  
E info@bauerfeind.com





